

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso VGS

Data di revisione: 29

Revisione: 3

Pagina 1 di 2

P.O. Box 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tel. (800) 729-8350 - Tel. (435) 755-9848 - Fax (435) 755-0015 - www.scytek.com

La soluzione di Van Gieson

Descrizione: La soluzione di Van Gieson è destinata all'uso nella visualizzazione istologica del collagene in sezioni di

tessuto. Questo reagente viene utilizzato in molte procedure speciali di colorazione, tra cui il kit di

colorazione di ferro colloidale e il kit di colorazione elastica (Verhoff modificato).

Collagene: Rosso Fibre muscolari: Giallo Citoplasma: Giallo

Usi/Limitazioni: Da non prendere internamente.

Solo per uso diagnostico in vitro.

Applicazioni istologiche.

Non utilizzare se i reagenti diventano

torbidi.

Non utilizzare la data di scadenza

precedente.


Prestare attenzione quando si

maneggiano i reagenti.

Non sterile.

Controllo dei tessuti: Polmone

Utero Muscolo Rene

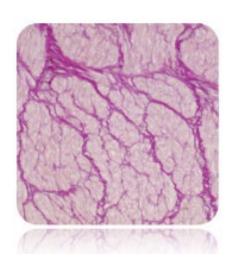

Informazioni per l'ordine e prezzi attuali su <u>www.scytek.com</u>

Disponibilità: Articolo # Volume

VGS125 Confezione da 125 ml VGS500 Flacone da 500 ml VGS999 Flacone da 1000 ml

Immagazzinamento: Conservare a 18-25°C.

Precauzioni: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Nocivo se ingerito.

Seguire tutte le normative federali, statali e locali relative allo smaltimento.

Procedimento:

- 1. Deparaffinare le sezioni se necessario e idratarle in acqua distillata.
- 2. Applicare un'adeguata soluzione di Van Gieson per coprire completamente la sezione di tessuto e incubare per 1 minuto.
- 3. Risciacquare il vetrino con alcool assoluto.
- 4. Disidratare in 2 cambi di alcol assoluto, limpido, e montare in resina sintetica.

Conservazione: 18° C



Laboratori ScyTek, Inc. 205 Sud 600 Ovest

Logan, UT 84321 U.S.A.



EC | REP | 8570

EmergoEurope (31)(0) 70 345-

Molsnstraat 15

2513 BH L'Aia, Paesi Bassi

Documento: IFU-Template18-25rev2



Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso VGS

Data di revisione: 29

Revisione: 3

Pagina 2 di 2

P.O. Box 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tel. (800) 729-8350 - Tel. (435) 755-9848 - Fax (435) 755-0015 - www.scytek.com

